




**Universal
Basic**



**Universal
Comfort**

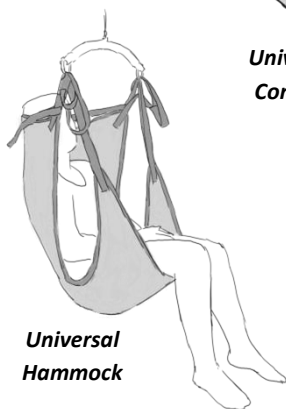

**Universal
Hammock**



**Universal
Amputee**

Helsejæl

ergo
slings

Brugermanual

- Universal Basic
- Universal Comfort
- Universal Hammock
- Universal Amputee

Vigtig information

Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Denne brugermanual henvender sig til plejepersonale, pårørende og terapeuter i forbindelse med brug og vedligeholdelse af sejl af mærket ErgoSling.

Dato: 31.07.2015 - Version 06

Indholdsfortegnelse

1	Formål	4
2	Sikkerhedsinstruktioner	4
3	Tjek inden brug	5
4	Løftet	6
5	Vedligeholdelse	
5.1	Vaskeanvisning	8
5.2	Opbevaring	8
6	Eftersyn	9
7	Miljø og kvalitet	
7.1	Bortskaffelse	9
7.2	Kvalitet	9
7.3	Symboler og forkortelser	10
Universal Basic		
	Anvendelse	11
	Specifikationer	11
Universal Comfort		
	Anvendelse	12
	Specifikationer	12
Universal Hammock		
	Anvendelse	13
	Specifikationer	13
Universal Amputee		
	Anvendelse	14
	Specifikationer	14

1. FORMÅL

Denne serie af **ErgoSlings** er alle Universal helsejl og har til formål, at løfte eller forflytte personer med nedsat mobilitet.

Forflytningen kan ske ved brug sammen med stationære eller mobile personløftere.

- Sejlet kan anvendes på hospitalet, i hjemmeplejen, institutioner, samt i private hjem.
- Sejlet kan anvendes til forflytninger fra seng til kørestol/stol eller fra stol til bade- og toiletstol m.m.
- Alle modeller af Universal sejl fås i flere størrelser og nogle af sejlene fås med eller uden hovedstøtte. Se specifikationer for de enkelte sejlmodeller i denne brugermanual.

NOTE: Alle sejlmodeller er beskrevet i denne manual. Illustrationer og beskrivelser er gældende for alle varianter, medmindre andet er beskrevet.

NOTE: **ErgoSlings** må ikke anvendes til andre formål, end dem der er beskrevet i denne brugermanual.

2. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



Vigtig – advarsel!

Læs brugermanual og disse sikkerhedsinstruktioner grundigt inden sejlet tages i brug:

- Sejlets maksimum løftekapacitet må ikke overskides.
- Størrelsen og modellen på sejlet skal passe brugeren korrekt.
- Det skal sikres, at sejlet ikke har synlige skader eller er slidt. Specielt syninger skal tjekkes og være intakte. Løftestropperne må ikke være flosset, og der må ikke være slået knuder på stropperne.
- Sejlet skal være rent af hygiejnemæssige årsager. Se vaskeanvisning i kapitel 5.
- Ved påsætning af sejl og under løft skal der altid være kvalificeret personale tilstede.
- Ved brug af andet udstyr, skal det sikres, at der ikke opstår farlige situationer. *Eksempelvis:* Hvis sejlstropperne sætter sig fast i hjulene på kørestolen eller lignende.
- Det skal sikres, at hverken hjælperen eller brugeren kan komme til skade under brugen af sejlet.
- Brugeren må aldrig efterlades alene i sejlet.
- Det er hjælperen, der er ansvarlig for, at sejlet anvendes korrekt og har ansvaret for, at sikkerheden overholdes. Se kapitel - 3. *Tjek inden brug.*

3. TJEK INDEN BRUG

Hjælperen er ansvarlig for, at sejlet tjekkes inden det benyttes, samt der er modtaget instruktioner i brugen.


Følgende punkter tjekkes inden brug:

- 1) Kontroller, at sejlet er den rigtige model og har den korrekte størrelse, således at det passer til løftesituationen og til brugeren.

Note: Alle sejlene har en farvet strop, som indiker størrelsen og midterlinjen af sejlet.




Målskema med hovedstøtte (alle mål er ca. mål)

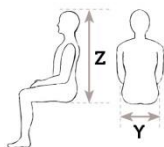

	XS	S	M	L	XL	XXL
Y	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
Z	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Farve	Hvid	Rød	Gul	Grøn	Blå	Sort

Målskema uden hovedstøtte (alle mål er ca. mål)

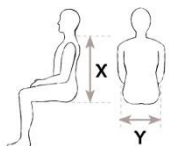

	XS	S	M	L	XL	XXL
Y	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Farve	Hvid	Rød	Gul	Grøn	Blå	Sort

- 2) Det er vigtigt, at kontrollere om løfteågets bredde er korrekt, således det passer til brugerens skulderbredde.
- 3) Kontroller at stropper og sejlstoffet er intakt. Der må ikke være slid eller ødelagte syninger.
- 4) Kontroller at sejlet er rent.
- 5) Ved tvivl omkring brugen af sejlet kan Ergolet kontaktes for råd og vejledning.

4. LØFTET

Note: Løftesituationen skal altid være planlagt og det skal sikres, at brugeren føler sig tryk, ved at blive løftet i sejlet.

Løft fra siddende stilling:

Gælder for **Basic**, **Comfort** og **Amputee** sejl:

- 1) Sejlet placeres bag brugerens ryg med den farvede strop ved labelen, som markeringen for midterlinjen. Midterlinjen skal følge brugerens rygrad.
- 2) Stik hånden ned i placeringslommen og skub sejlet så langt ind under brugerens læn som muligt.



- 3) Benstøtterne på sejlet placeres langs brugerens ben og benstroppeerne føres forsigtig ind under benene.



Note: Pas på ikke at trække i stropperne, når de skal under brugerens ben. Det kan lette, hvis brugerens fødder placeres på en fodstøtte eller ved at anvende et glidestykke.

Gælder for **Basic** sejl:

- 4) Når begge benstøtterne er placeret korrekt under benene, krydses benstroppeerne.
- 5) Fastgør sejlstropperne på løfteågets kroge. Se vejledning på side 8.
- 6) Løft nu forsigtigt brugeren op, når stropperne er strakt ud, kan sejlet rettes til, så det sidder korrekt.



Gælder for **Comfort** og **Amputee** sejl:

Følg punkt 1-3 for "Løft fra siddende stilling".

- 4) For amputationssejlet justeres velcostykkerne om benstumpen.



- 5) Den farvede korte strop krydses indover løftestropen på modsatte side. (A)
Derefter krydses stropperne fra benstøtterne med benstropperne fra inderlåret (B)



- 6) Fastgør sejlstropperne på løfteågets kroge. Se vejledning på side 8.
- 7) Løft nu forsigtigt brugeren op, når stropperne er strakt ud, kan sejlet rettes til, så det sidder korrekt.

A



B

Løft fra liggende stilling:

- 1) Brugeren lægges om på siden og sejlet foldes til midten. Placer den foldede del under brugeren.
- 2) Læg derefter brugeren om på den anden side og fold sejlet helt ud og læg derefter brugeren om på ryggen.
- 3) Før benstropperne ind under benene og træk stropen ind mellem benene på brugeren.
- 4) Fastgør sejlstropperne på løfteågets kroge. Se vejledning på side 8
- 5) Løft nu forsigtigt brugeren op, når stropperne er strakt ud, kan sejlet rettes til, så det sidder korrekt.



Fastgør sejl på løfteåget



Ergolet fraskriver sig ansvaret, såfremt sejlet ikke er fastgjort korrekt i løfteågets kroge.

Det er altid hjælperens ansvar, at det korrekte sejl anvendes og at det passer til behovet/formålet.

- 1) Sejlstroppen placeres på den åbne krog.

Note: På nogle modeller er der flere farver på stroppen. Her er det vigtigt at den samme farve anvendes på krogene i hver side for at undgå et skævt løft.

- 2) Stroppen trækkes ned og kroge lukkes med et "klik".

Note: Løftekroge er udformet på en sådan måde, at brugerens vægt automatisk vil holde kroge lukket.

For at hæfte stroppen af, løftes stroppen op og kroge åbner.



Det bør sikres, at brugerens fingre ikke kommer i klemme i kroge.

5. VEDLIGEHOLDELSE

5.1 Vaskeanvisning

Alle Universalsejl kan maskinvaskes og tørres ved lave temperature i en tørretumbler.

Følg vaskeanvisningerne som er vist med symboler og påtrykt på sejlappen.

Note: På modeller med hovedstøtte skal plastskinne fjernes inden sejlet kommes i vaskemaskinen.

Note: Anvend ikke skyldemiddel.



En forklaring af symbolerne kan ses under kapitel 7.3 - *Symboler og forkortelser*.

5.2 Opbevaring

Skal sejlet ikke anvendes, bør det pakkes ind i original emballage og opbevares i tørre og rene omgivelser i en temperatur på 0-40°C.

6. EFTERSYN

ErgoSlings efterses mindst en gang hvert halve år i henhold EN/ISO 10535, Annex B, som anbefaler at kvalificeret fagpersonale med kendskab til brugen af sejl gennemfører et eftersyn.

Det er den juridiske ejer af produktet, der har ansvaret for, at sikre at eftersynet gennemføres. Skema for eftersyn kan rekvireres hos Ergolet.

Garanti

Der ydes to års garanti på materiale og fabrikationsfejl, såfremt at sikkerheds- og vaskeanvisningen er overholdt.

7. MILJØ OG KVALITET

ErgoSlings har en forventet levetid på mellem 5 - 10 år ved normal daglig brug. Dette forudsætter, at de anbefalede eftersyn er blevet udført og at den normale vedligeholdelse er overholdt.

7.1 Bortskaffelse

ErgoSlings kan afleveres sammen med brændbare materialer på genbrugsstationen eller til Ergolet.

7.2 Kvalitet

Ergolet er certificeret efter kvalitetstandarden ISO 9001 og ISO 13485.

Disse certifikater betyder, at produktet og virksomheden lever op til de gældende internationale standarder for kvalitetsstyring og standarder for sporbarhed for medicinske produkter.

ErgoSlings er klassificeret som Medicinsk udstyr klasse 1 produkt.

7.3 Symboler



Tåler normal maskinvask ved den angiven temperatur.



Tåler ikke stryging



Tåler ikke blegemidler.



Tåler ikke kemisk rens.



Tåler tørretumling ved lav temperatur.



Referer til brugermanualen



Produktet kan afleveres til almindelig renovation

SWL

Safe working load (Sikkerhedsbelastning) = (bruger + tilbehør)

CE

Produktet er CE-mærket.

UNIVERSAL BASIC

Universal Basic med hovedstøtte

Universal Basic med hovedstøtte, net



Universal Basic uden hovedstøtte

Universal Basic uden hovedstøtte, net



Anvendelse:

- **Universal Basic** anvendes til brugere, som ikke er stabile i deres overkrop og som derved har brug for ekstra støtte på lår og overkrop.
- **Universal Basic** fås med hovedstøtte, som kan anvendes til brugere, som ikke har fuld hovedkontrol.
- **Universal Basic, net** tørrer hurtigere og kan med fordel anvendes i badesituationer.

Specifikationer:

SWL	275 kg
Materiale	Polyester
Polstring	Ja
Passer til følgende åg	2-, 3- og 4-punkt
Sejlet fås i størrelserne	XS - XXL
Delte benstøtte	Ja



Scan QR-koden for
yderligere information

UNIVERSAL COMFORT

Universal Comfort med hovedstøtte

Universal Comfort med hovedstøtte, net



Universal Comfort uden hovedstøtte

Universal Comfort uden hovedstøtte, net



Anvendelse:

- **Universal Comfort** anvendes til brugere med reduceret fysisk funktionalitet, amputation eller brugere med behov for støtte af overkroppen.
- **Universal Comfort** fås med hovedstøtte, som kan anvendes til brugere, som ikke har fuld hovedkontrol.
- **Universal Comfort, net** tørrer hurtigere og kan med fordel anvendes i badesituationer.

Specifikationer:

SWL	275 kg
Materiale	Polyester
Polstering	Ja
Sejlet fås i størrelserne	XS - XXL
Passer til følgende åg	2-, 3- og 4-punkt
Delte benstøtte	Ja



Scan QR-koden for
yderligere information

UNIVERSAL HAMMOCK

Universal Hammock med hovedstøtte, net
Universal Hammock uden hovedstøtte, net



Universal Hammock med hovedstøtte og toiletåbning, net
Universal Hammock uden hovedstøtte og toiletåbning, net



Anvendelse:

- **Universal Hammock** anvendes til brugere med nedsat krops kontrol og som har brug for at sejlet forbliver på efter forflytningen er foretaget.
- **Universal Hammock** fås med hovedstøtte, som kan anvendes til brugere, som ikke selv har hovedkontrol.
- **Universal Hammock** med og uden hovedstøtte fås med toiletåbning, som giver brugeren mulighed for at forblive i sejlet ved toiletbesøg.
- **Universal Hammock, net** tørrer hurtigere og kan med fordel anvendes i badesituationer.

Specifikationer:

SWL	275 kg
Materiale	Polyester
Polstering	Ja
Sejlet fås i størrelserne	XS - XXL
Passer til følgende åg	2-, 3- og 4-punkt
Delte benstøtte	Nej



Scan QR-koden for yderligere information

UNIVERSAL AMPUTEE

Universal Amputee med hovedstøtte



Universal Amputee uden hovedstøtte



Anvendelse:

- **Universal Amputee** anvendes til brugere med reduceret fysisk funktionalitet, femuramputeret og brugere med behov for støtte af overkroppen.
- **Universal Amputee** fås med hovedstøtte, som kan anvendes til brugere, som ikke har fuld hovedkontrol.

Specifikationer:

SWL	275 kg
Materiale	Polyester
Polstering	Ja
Sejlet fås i størrelserne	XS - XXL
Passer til følgende åg	2-, 3- og 4-punkt
Delte benstøtte	Ja



Scan QR-koden for
yderligere information

Fabrikant:

Ergolet
Tårnborgvej 12 C
4220 Korsør
Danmark

Phone: + 45 70 27 37 20
Fax: + 45 70 27 37 19
Email: salg@ergolet.dk
www.ergolet.com

93/42/EØF CLASS I

DS/EN 10535



910-00767DK